

OVITRELLE®

Koriongonadotropiini alfa



Ovitrelle esitäytetty kynä
250 mikrog/0,5 ml

Näin käytät **esitäytettyä** OVITRELLE-kynää

Vain 3 vaihetta



1

Valmistelut

Ennen jokaista pistosta lue käyttöohjeet ja pakkauseloste huolellisesti


- Repäise suojapaperi pois.
- Kierrä esitäytetyn Ovitrelle-kynän kierrekärkeä uloimpaan neulansuojukseen niin kauan, että tuntuu lievää vastusta. Älä kiinnitä neulaa liian tiukasti – neulaa voi olla vaikea irrottaa pistoksen jälkeen.
- Poista ulompi neulansuojus.



2

Annoksen asettaminen

- Aseta annos kääntämällä annosvalitsinta myötäpäivään, kunnes annos 250 tulee näkyviin näyttöön. Älä paina tai vedä annosvalitsinta, kun käännät sitä.

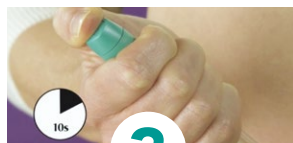

3

Annoksen pistäminen

- Valitse pistoskohta lääkärin tai sairaanhoitajan antamien ohjeiden mukaan.
- Voit halutessasi puhdistaa pistoskohdan desinfiointilapulla.
- Varmista, että annosnäytössä näkyy luku 250. Poista varovasti sisempi neulansuojus.
- Paina neula rauhallisesti kokonaan ihoon ja paina sen jälkeen annosvalitsin niin pitkälle kuin se menee. Pidä neula ihon alla annosvalitsin alas painettuna vähintään 5 s.
- Pidä annosvalitsin edelleen alas painettuna ja vedä neula pois ihosta. Sen jälkeen vapauta annosvalitsin.
- Tarkista, että annosnäytössä näkyy 0. Se osoittaa, että annos on annettu kokonaan.

Pistoksen jälkeen

- Aseta ulompi neulansuojus varovasti takaisin neulaan.
- Ota kiinni ulommasta neulansuojuksesta ja irrota neula kiertämällä.
- Laita injektioikynän korkki takaisin paikoilleen.



Koriongonadotropiini alfa



Ovitrelle esitäytetty kynä
250 mikrog/0,5 ml

Turvallisuus

Hävitä aina neulat ohjeistusten mukaisesti.
Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltäsi tai apteekista.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KÄYTETTYÄ NEULAA UUELLEEN

Säilytys:

JÄÄKAAPPI

2–8 °C Ei saa
jäättyä.

Ota kynä jääkaapista noin puoli
tuntia ennen pistämistä.
Tällöin pistäminen on miellyttävämpää.

Älä käytä valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän
(EXP/Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä myöskään käytä valmistetta mikäli huomaat
lääkeaineessa hiukkasia tai sameutta.

Merck Oy
Keilaranta 6, 02150 Espoo
www.merck.fi

MERCK