

Pergoveris™

(follitropin alfa and lutropin alfa for injection)



Esitötetty Pergoveris-kynät

Näin käytät **esitötettyä** Pergoveris-kynää

Vain 3 vaihetta



1

Neulan kiinnitys

- Irrota kynän korkki
- Varmista, että annosnäytössä näkyy 0
- Poista irtirepäistävä suojapaperi ulommaisesta neulasuojuksesta
- Kierrä esitötetyn Pergoveris-kynän kierrekärkeä uloimpaan neulasuojukseen niin kauan, että tuntuu lievää vastusta. Älä kiinnitä neulaa liian tiukasti – neulaa voi olla vaikea irrottaa pistoksen jälkeen.



2

Annoksen asettaminen

- Käännä annosvalitsinta niin kauan, että lääkärin määräämä annos näkyy annosnäytössä. Voit säätää annosta 12.5 IU välein.
- Mikäli tarpeellista, korjaa annosta kääntämällä annosvalitsinta taaksepäin
- Tarkista aina ennen pistosta, että annosnäytössä näkyy oikea annos



3

Annoksen pistäminen

- Työnnä neula hitaasti ihoon 90° kulmassa
- Paina annosvalitsin niin pitkälle kuin se menee. Mitä suurempi annos, sen kauemmin pistäminen kestää. Pidä annosvalitsinta alhaalla vähintään 5 sekuntia. Annosnäytön lukema on taas 0.
- Vedä neula ulos ihosta samalla kun pidät annosvalitsinta alas painettuna
- Ihoärsytyksen välttämiseksi kierrätä pistospaikkoja

Pergoveris™

(follitropin alfa and lutropin alfa for injection)




Esitäytetyt Pergoveris-kynät

Turvallisuus

Hävitä aina neulat ohjeistusten mukaisesti. Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltäsi tai apteekista.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KÄYTETTYÄ NEULAA UUDELLEEN

Säilytys:

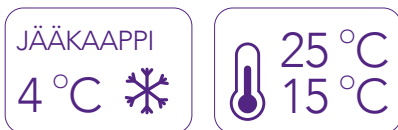

Kirjoita ylös ensimmäinen kynän käyttöpäivä. Kun pakkaus on avattu, esitäytettyä kynää saa säilyttää korkeintaan 28 päivää jääkaapin ulkopuolella (lämpötilassa 25 °C).

Älä käytä valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP/Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä myöskään käytä valmistetta mikäli huomaat lääkeaineessa hiukkasia tai sameutta.

Merck Oy
Keilaranta 6, 02150 Espoo
www.merck.fi

MERCK